




1. DRY DAYS Enürezis alarının kullanıma hazırlanması

Duyargaların içine konmasına yarayacak olan bezleri külotlara dikiş. Çocuğunuz erkek ise bezi külotun dış ön yüzüne dört tarafından dikiş. Çocuğunuz eğer kız ise, bezleri külotun yine ön dış yüzüne ancak biraz daha alt tarafa dikiş. Kullandığınız külotların pamuktan yapılmış olmasına dikkat edin.


Dikim işlerinden sonra, kullanım sırasında alarm cihazını pijamanın omuz kısmına klips ile tutturun ve ara kabloyu pijamanın içinden geçirerek, külotu dikmiş olduğunuz bezin içine yerleştirin.

SENSORDEN ALARMA GİDECEK KABLO , ÇOCUĞUN UYURKEN İSTEM DİŞİ YAPACAĞI BİR HAREKET İLE KOPMAMASI İÇİN KIYAFETİNİN İÇİNDEN GEÇİRİLMELİDİR

ERKEK

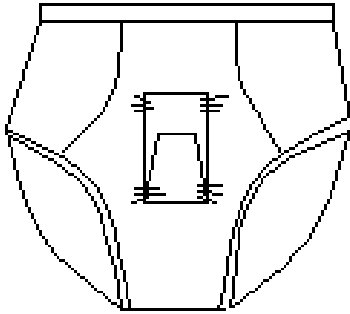

KIZ

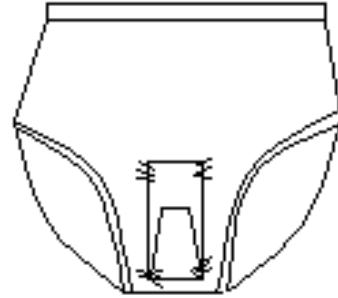

Duyargayı bezin cep kısmına yerleştirin



Ambalajın içeriği

1 adet Enürezis Alarmı

1 Adet duyarga

2 Adet bez cep

1 Kullanım kılavuzu ve Takvim

2- DRY DAYS Enürezis Alarminin Kullanılışı

1. Alarmin pilleri test edilmesi için takılı durumdadır,kullanmaya başlamadan önce duyargaya nemli parmaklarınızla dokunarak çalışıp çalışmadığını kontrol edin.Eğer ses çıkıyorsa alarminız çalışıyor demektir ve duyargayı o iş için tahsis edilmiş pamuklu bir bez ile silerek susmasını sağlayın.Alarm çalışmıyor ise satın almış olduğunuz yer ile irtibata geçin. **Cihaz üzerindeki piller ilk başta test etmeniz için takılmıştır düzenli kullanımda değiştirmeniz gereklidir**
2. Cihazınız piller ve duyarga hariç fatura tarihinden itibaren 24 ay garantilidir
3. Alarmı omuzuna tutturarak ara kabloyu pijamanın altından geçirin ve duyargayı yine daha önce külodun dışına dikmiş olduğunuz bezin cep kısmına yerleştirerek cırtı tutturun SENSORDEN ALARMA GİDECEK KABLO , ÇOCUĞUN UYURKEN İSTEM DIŞI YAPACAĞI BİR HAREKET İLE KOPMAMASI İÇİN KİYAFETİNİN İÇİNDEN GEÇİRİLMELİDİR.(ve birinci maddede yaralan kontrolü kullanım öncesi her akşam yapınız, pillerin zayıflaması veya bitmesi durumunda cihazın yeni pilleri (+) ve (-) yönlerine dikkat ederek yuvasına takınız
4. Çocuğunuza her gece alarmin sesini duyar duymaz idrarını tutmasını söyleyiniz.Bu sesin ona “ rüyasından geldiğini” zannetmemesini anlatınız. ÇOCUĞUNUZUN YATMADAN ÖNCE LİKİT ALMASINI ENGELLEMEYİN AMA DİÜRETİK İÇECEKLER(KAHVE, ÇAY, KOLA) VERMEKTEN KAÇININ.
5. İlk bir-iki hafta süresince çocuğunuza yardımcı olunuz.Alarmin çalışmasını takiben çocuğunuzu yataktan kaldırarak, tutmuş olduğu idrarını tuvalette sonlandırmasını sağlayın ve buna alıştıırın.Alarm çalıştığında onu asla siz susturmayın.Sadece odanın ışığını açın ve çocuğunuz uyanana dek alarmin çalmasına izin verin.Çocuğunuz uyanıp alarmin duyargasını silerek alarmı susturduktan sonra çocuğunuzun yüzünü soğuk suyla yıkayınız. Bu işlemleri iki-üç hafta içinde çocuğunuzun tek başına yapabilmesini sağlayın. ÇOCUĞUN ALARMA CEVAP VERMESİ UYKUDAN UYANMASI BAŞLANGIÇTA BİRKAÇ HAFTA ALABİLİR.
6. Çocuğunuz tek başına alarmı kullanmaya başlayacağı için, yatağından tuvalete kadar olan alanda çarpabileceği,ayağına takılabilecek veya korkabileceği nesneleri ortalıktan kaldırın ve bu alanın gece lambası ile aydınlatılmış olmasını sağlayın.
7. Çocuğunuzun külotu ıslanmış ise tekrar yatmadan önce onu yenisi ile değiştirmesini sağlayın ve alarmı tekrar hazır hale getirmesini öğretin.Yatağı ısladıysa kuru bir havlu veya bez ile ıslak bölümün üzerini örtün.
8. **Geceleri alarm çalmadan kesinlikle çocuğunuzu kaldırıp tuvalete gitmesini sağlamayın,bu tedavinin aksamasına neden olur.Ancak; çocuğunuz kendi kendine uyanıp kalkabilir.**
9. Çocuğunuzun her zamanki saatten 1 saat önce yatmasını veya düzenli öğleden sonra uykusuna yatmasını sağlayın.Bu alarma karşı cevabının daha çabuk olmasını sağlayacaktır.
10. Çocuğunuz kuru geçen her gece için veya yapmasını öğrendiği herşey için basit şeylerle ödüllendirin.Ayrıca size kit içinde verilen takvimi doldurmasını sağlayın ve **bu takvimde yeralan hedef - ödül bölümlerini çocuğunuzla konuşarak 6 haftalık döneme başlamadan doldurunuz. Çizelgeyi mutlaka doldurun bu alarmı kullanmanız kadar önemlidir** Doktorunuzun, tedavinin aşamalarını doğrudan görmesine yardımcı olması amacıyla kontrole giderken takvimi beraberinizde götürünüz.
11. 1 ay boyunca çocuğunuz altını hiç ıslatmadıysa alarmı kullanmayı bırakabilirsiniz.eğer tekrar altını ıslatmaya başlarsa tekrar kullanmaya başlayınız.
12. **Enürezis alarm tedavisinin mutlaka doktor kontrolünde yapılması gerektiği için doktor kontrolünden geçmeyen benzer sorunu yaşayan bir başka kişinin kullanması sakınca yaratabilir.**

12 ALARM ÇALMIYOR VEYA SES ÇOK AZ GELİYOR.İSE PİLLERİ DEĞİŞTİRİNİZ NORMAL KULLANIMDA PİLLER 1 AY DAYANIR. PİL DEĞİŞİMİ İÇİN ALARM CİHAZININ ARKASINDA BULUNA KAPAĞI AÇIP 4 ADET YENİ LR 44 PİL ESKİLERİYLE DEĞİŞTİRİP KAPAĞI KAPAYINIZ. ÜRÜNÜ UZUN ZAMAN KULLANMIYACAKSANIZ ÜRÜNÜN PİLLERİNİ DIŞARIDA SAKLAYINIZ.